



WEYERGANS
future health

GLEITWELLENMASSAGE: DIE SANFTE LÖSUNG FÜR CELLULITE UND BEINLEIDEN

original
SLIDE STYLER®

Mechanische Lymphdrainage und Bauchdeckenmassage

Mechanische Lymphdrainage mit dem original Slide Styler.
Medizinisch belegte Wirksamkeit, auf Dauerbetrieb ausgelegt und weltweit im Einsatz.
*Mechanical lymph drainage with the original Slide Styler.
Medically proved effectiveness, designed for permanent operation and in use all over the world.*



Einsatzgebiete: Gesundheitscenter, Wellness-Einrichtungen, Kosmetik-Institute und Spas. Zur Entschlackung bei Cellulite und zum Entstauen ödematöser Gewebeschwellungen an den unteren und oberen Extremitäten. Behandlungsbaustein der Differenzierten Cellulite Behandlung (DCB). Speziell: auch zur Tonisierung des Dünndarms und Massage der Bauchdecke.


Technische Daten: 230 Volt, 40 Watt. 430 x 167 x 350 mm (BHT). Behandlungsdruck von 0 bis 120 mbar stufenlos digital einstellbar. Regulierung der Druckwellengeschwindigkeit. Zeitschaltuhr. 26 Luftkammerausgänge, einzeln angesteuert. Separate Manschetten für Füße, Beine, Hüfte, Bauch und Arme aus strapazierfestem Kunstleder (waschbar); durch praktischen Klettverschluss passend für jede Größe. Softline-Design auf Wunsch.

Bewährte vollautomatische und gut wirksame Behandlung. Einfaches Anlegen der Manschetten. Einfache und sichere Bedienung. Die pneumatische Steuerung findet automatisch den richtigen Behandlungsdruck. Keine Personalbindung. Auf Dauerbetrieb ausgelegt. Hohe Rentabilität.

Original Slide Styler: weltweit die Nummer 1 der mechanischen Lymphdrainage

Herstellung und Vertrieb:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Düren
Tel. +49-(0) 24 21-96 78-0
Fax +49-(0) 24 21-96 78-20
info@weyergans.de · www.weyergans.de

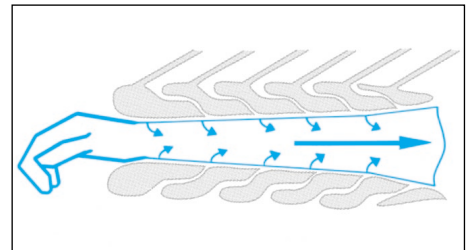

Der Querschnitt durch eine original Slide Styler Manschette zeigt die überlappenden Luftkammern. Eine technische Voraussetzung für hohen Behandlungserfolg.

The cross-section of an original Slide Styler sleeve shows the overlapping air chambers - a technical prerequisite for excellent results.



Ohne Lymphdrainage keine erfolgreiche Cellulitebehandlung. Die entschlackenden Behandlungen werden als sehr angenehm empfunden.

Without lymph drainage no successful cellulite treatment. The detoxifying treatments are a pleasant experience for the patient.